

CAPBUSSA'T


Guia de recomanacions
per a la cura d'audiòfons i
implants coclears a l'estiu!

ACAPPS 

Famílies i persones amb sordesa

Els audiòfons i implants coclears són dispositius electrònics molt sensibles a la **humitat, la suor, la sorra i el sol intens**.

Per això, cal tenir una cura especial durant l'estiu, especialment si es fan activitats a l'aire lliure, a la piscina o a la platja.

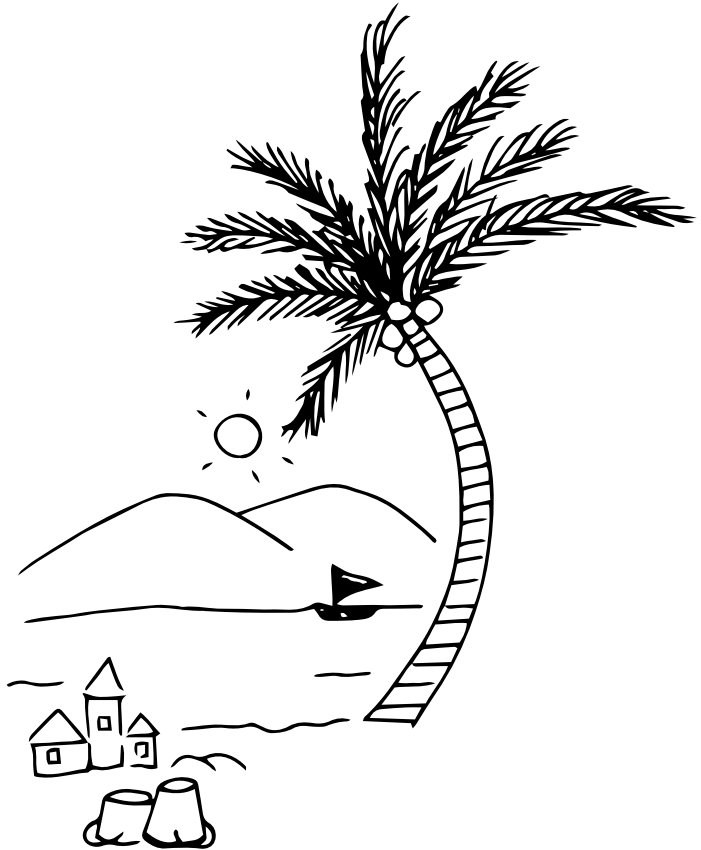

Tingues present!

- ✓ Consulta sempre amb l'audiòleg/a o el fabricant abans de fer servir accessoris nous.
- ✓ La protecció adequada evita reparacions i allarga la vida útil de la pròtesi.
- ✓ A l'estiu, una bona planificació i protecció marquen la diferència per garantir una bona audició.

Aquestes són les recomanacions essencials d'ACAPPS per mantenir les pròtesis auditives dels infants en bon estat i evitar avaries: per a un estiu sense ensurts!



1

A l'aigua

A l'estiu, els infants poden capbussar-se i banyar-se a la platja o a les piscines amb el seu implant coclear protegint-lo, això sí, amb una **funda específica per a aquest ús**. Per a jocs d'aigua, alguns audiòfons i implants coclears tenen una certa **protecció i tolerància a les esquitxades (IP ràting)**, però no són submergibles.



Protegeix el teu implant coclear amb la funda abans de banyar-te, sigui a la platja o la piscina, i segueix sentint tots els sons de l'entorn mentre fas l'activitat.

Si preveus que hi haurà esquitxades o estaràs en un entorn humit, el més recomanable és protegir el dispositiu amb fundes impermeables dissenyades per a aquest ús.

Important: en el cas dels audiòfons, no hi ha fundes protectores per l'aigua. En aquest cas, sí que cal treure's l'audiòfon per banyar-se i tenir especial cura en jocs d'aigua.



Fundes impermeables per a implants coclears

Existeixen fundes especials que permeten banyar-se i submergir-se amb seguretat amb l'implant coclear. Aquestes fundes protegeixen el processador de so i permeten que l'infant pugui participar en activitats aquàtiques amb tranquil·litat, sempre que es segueixin les recomanacions d'ús del fabricant.

Recordatori general:

Cada marca té la seva pròpia funda específica i no són intercanviables.

Cal conèixer el model exacte del processador de so.

Sempre s'han de llegir i seguir les instruccions del fabricant per garantir una protecció segura i eficaç.

Aquestes fundes estan pensades per a persones actives i són una gran eina per millorar la qualitat de vida i la inclusió dels infants en activitats aquàtiques.

Aqua+ de Cochlear

Què és? Una funda de silicona flexible i impermeable per al processador Nucleus.

Compatible amb: Nucleus 5, Nucleus 6, Nucleus 7 i Nucleus 8.

Característiques:

Permet immersions fins a 3 metres durant un màxim de 2 hores.

Necessita una bateria compacta específica i es recomana l'ús d'un gorro o cinta de fixació.

Recomanacions:

Comprovar que la funda estigui en bon estat i ben tancada.

No utilitzar-la si hi ha dubtes sobre l'estanquitat.

[Més informació](#)

WaterWear de MED-EL

Què és? Funda impermeable reutilitzable per a processadors RONDO i OPUS.

Característiques:

Protecció total contra l'aigua, inclòs submergir-se. Cal fer servir piles d'un sol ús.

Recomanacions: Tancar correctament la funda i comprovar que no hi ha humitat abans de col·locar el processador.

[Més informació](#)

AquaCase d'Advanced Bionics

Què és? Estoig protector submergible per al processador de so Naída CI.

Característiques:

Converteix el processador en resistent a l'aigua per jocs aquàtics o immersions.

Té un disseny robust, apte per a activitats físiques intenses o zones amb molta humitat.

S'utilitza amb una coberta 3D específica i cable de connexió, segons el model.

Recomanacions:

Seguir la guia d'instal·lació pas a pas. Compatible amb sistemes d'ancoratge per evitar que el dispositiu es mogui dins l'aigua.

[Més informació](#)

2



SOL I CALOR

Cal evitar al màxim que les pròtesis auditives estiguin exposades al sol i la calor extrema:

Mai deixis els audiòfons o els implants coclears exposats al sol directe (per exemple, sobre una tovallola o dins del cotxe).

Guardar-les a l'ombra i dins de l'estoig tancat.

Evita llocs molt calents com saunes, banys de vapor o interiors de vehicles.



Pots utilitzar:

Gorros o cintes de neoprè amb protecció UV, com el gorro SmartEar (Nammu) o les cintes de natació de Decathlon. Són útils per:

1. Fixar el dispositiu al cap.
2. Protegir les pròtesis auditives del sol i de petites esquitxades.
3. Evitar caigudes accidentals.

Per a infants petits, també es poden fer servir diademes o clips de seguretat, que subjecten el processador i eviten que es perdi.

Una caixa deshumidificadora cada nit

Després de dies calorosos o humits, és imprescindible assecar bé les pròtesis auditives per la nit: amb una **capsa elèctrica deshumidificadora** (com Dry & Store o Zephyr) o bé amb **càpsules dessecants** (més econòmiques i útils per viatges o l'ús diari).

Això ajuda a prevenir l'acumulació d'humitat interna i allarga la vida útil del dispositiu!

Cures diàries

Evita posar-te crema solar, esprais o repel·lents a prop de les orelles.

Asseca't bé el canal auditiu i la pell abans de tornar-te a col·locar l'audiòfon o el processador.

Fes una neteja suau del dispositiu amb un drap sec si ha quedat humit o brut de sorra o suor.

ACAPPS

Famílies i persones amb sordesa



acapps.org
[@federacioacapps](https://twitter.com/federacioacapps)

Amb el
suport de:



**Generalitat
de Catalunya**



**Ajuntament
de Barcelona**



**Fundación
ONCE**



FIAPAS
CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA
DE FAMILIAS
DE PERSONAS SORDAS